
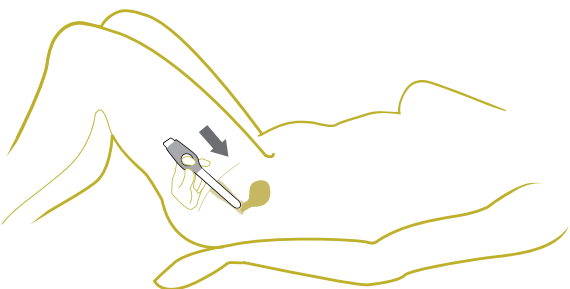


Baca petunjuk ini dengan seksama sebelum menggunakan Delphi Screener

Para Delphi Screener memungkinkan anda untuk mengumpulkan sampel cairan dari serviks dan vagina dengan cara sederhana dan bebas rasa sakit. Ini telah direka untuk memastikan atas screener ini akan mendekati serviks dengan penyisipan di vagina.


Atas Screener mengandung sejumlah kecil (1 sendok teh) air steril. Dengan menekan tombol di bagian belakang, air steril akan menyebar di sekitar area serviks. Saat tombol dilepaskan, air akan mengalir kembali ke Screener dengan cairan dari leher rahim dan vagina. Setelah mengeluarkan Screener dari vagina sampel tersebut kemudian dipindahkan ke dalam botol. Sebuah laboratorium akan menguji sampel.

Jangan gunakan Screener ketika anda memiliki waktu anda (misalnya ketika menstruasi) atau jika anda belum pernah melakukan hubungan. Jika anda menggunakan obat vaginal atau irigasi, anda harus berhenti menggunakan ini 2 hari sebelum menggunakan Screener tersebut. Anda dapat terus menggunakan cincin vagina, kondom atau pelumas berbahan dasar air. Se-jauh ini, belum ada pengalaman penggunaan dengan wanita hamil, namun karena bentuk lembut dan bulat Screener, tidak ada risiko ke-sehatan atau keselamatan diharapkan.

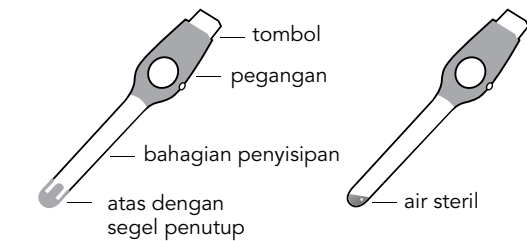

Persiapan

- 1 Cuci tangan anda.
- 2 Keluarkan botol, lepaskan tutup dan menjaga kedua dekatnya.
- 3 Buka kantong dengan Screener sampai benar-benar terbuka.
- 4 Ambil Screener dengan memegang gagang biru.
- 5 Tarik segel penutup dari atas dari Screener. Beberapa tetes air mungkin terlihat.

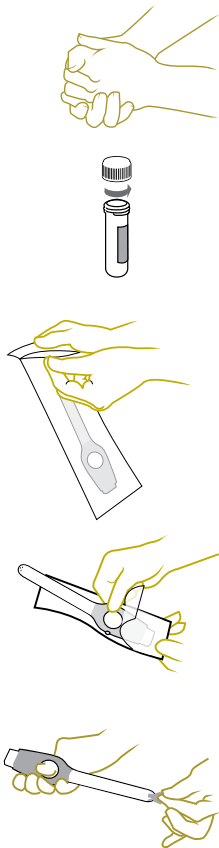

Pilih posisi anda

- 6 **A: Berbaring**
Menutupi bantal dengan handuk. Tempatkan bokong anda pada bantal. Angkat lutut dan menyebar kaki anda.
- B: Duduk**
Duduk di kursi toilet dengan menyebar kaki anda.




Bagaimana melakukan pengumpulan diri

Anda mungkin telah liat beberapa cairan yang keluar dari vagina setelah pengambilan sampel. Ini bukan masalah. Hanya sejumlah kecil sampel dalam botol tersebut diperlukan untuk tes yang harus dilakukan. Anda mungkin menemukan darah atau lendir pada Screener - ini adalah normal dan tidak akan mempengaruhi hasil pengujian.

- 7 Pegang Screener di gagang biru seperti yang ditunjukkan dalam gambar dan gunakan tangan anda yang lain untuk menyebarkan labia anda (bibir vagina). Masukkan bagian atas Screener secara perlahan dan lembut ke miring, vagina ke belakang, sedalam mungkin sampai anda merasa perlawanan.
- 8 Pegang Screener sementara menekan tombol putih sepenuhnya ke bawah.
- 9 Setelah tombol sepenuhnya turun, hitung sampai 3.
- 10 Lepaskan tombol dan mengambil keluar Screener dari vagina anda perlahan-lahan, mengubahnya seperti anda melakukannya. Cairan memerah kemudian akan mengalir kembali ke Screener tersebut. Kadang-kadang tombol putih tidak segera kembali ke posisi awal ketika mengambil keluar Screener. Hal ini OK.



- 11 Masukkan Screener Delphi ke botol dengan bagian atas setengah. Jauhkan botol dan Screener dalam posisi tegak. Tekan tombol dari Screener sepenuhnya ke bawah. Sampel kemudian akan dilepaskan ke dalam botol. Sampel akan tampak berawan dan mengandung lendir, ini adalah normal.

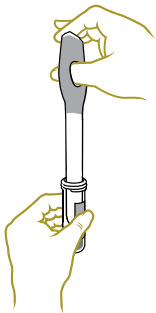


- 12 Ambil keluar Screener dari botol. Tempatkan tutup pada botol dan pastikan sudah kacau erat.




Apa yang harus dilakukan setelah mengambil sampel

13 Periksa apakah botol dengan benar diberi label dengan nama anda.

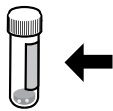


14 Masukkan Screener dan botol dengan sampel dalam kantong plastik dan menutup kedua strip segel.

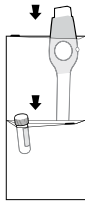

15 Cuci tangan anda lagi.



16 Tangan kantong plastik kepada dokter (-asisten).

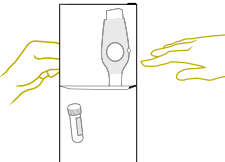

KEMBALI CONTOH ANDA DALAM WAKTU 24 JAM SETELAH KOLEKSI UNTUK JAMINAN KUALITAS SAMPEL.

Informasi umum


Anda tidak dapat menggunakan Screener setelah yang terbaik sebelum tanggal yang tertera pada kantong.

Jika kantong rusak atau dibuka, sterilitas Screener tidak dapat dijamin dan yang baru harus digunakan.

Silahkan kunjungi www.delphiscreener.asia untuk liat sebuah video animasi pada penggunaan Screener Delphi, untuk informasi tambahan tentang Screener atau untuk Petunjuk Pengguna dalam bahasa Inggris dan Cina.

Please visit www.delphiscreener.asia for an animation video on the use of the Delphi Screener, for additional information on the Screener or for User Instructions in the English and Chinese language.



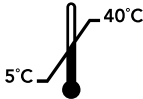



Delphi Bioscience B.V.
Glashorst 126
3925 BV Scherpenzeel
The Netherlands

Tanggal revisi terakhir: Maret 2012 -210019-

Penolakan
Delphi Bioscience tidak bertanggung jawab dengan cara apapun untuk digunakan ceroboh atau tidak benar dari perangkat ini. Jika, meskipun petunjuk ini, anda memiliki pertanyaan atau keraguan tentang penggunaan perangkat ini, hubungi dokter anda.

Pengguna Instruksi Delphi Screener

