



采样后做什么

13 检查一下小瓶上所标示的你的姓名是否正确。

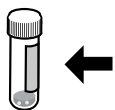


14 把检测仪和装着样本的小瓶一同放入配备的塑料袋里，并关闭封条。

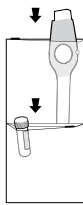

15 清洗双手。



16 将塑料袋交医生（或助手）。

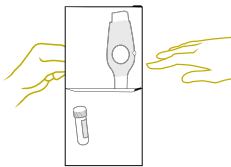

为确保检测效果，采样后，请于24小时内将样本交给医生。

注意


请不要使用超过最佳试用期的检测仪。最佳使用期注明在包装袋上。

如果包装袋已被开启或已破损，检测仪的无菌性可能被破坏。请不要使用。

登录[www.delphiscreener.asia](http://www.delphiscreener.asia)网站可获取更多关于Delphi检测仪的信息。信息以英文和马来文呈现。也可观看正确使用本检测仪的视频。

Please visit [www.delphiscreener.asia](http://www.delphiscreener.asia) for an animation video on the use of the Delphi Screener, for additional information on the Screener or for User Instructions in the English and Malay language.



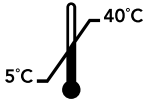

Delphi Bioscience B.V.  
Glashorst 126  
3925 BV Scherpenzeel  
The Netherlands

最后修订日期：2012年3月 -210020-

免责声明  
Delphi Bioscience不承担因不小心或因非正确使用本检测仪而导致的任何伤害和损失。除本说明之外，如果你对本检测仪以及使用方法有任何疑问，请联络你的医生。

使用说明





# 请仔细阅读此说明。然后使用 Delphi自采样宫颈癌检测仪

Delphi自采样宫颈癌检测仪能使你以无痛的方法从阴道采集流体样本。本检测仪的设计确保检测仪的顶端方便地插入阴道，并接近宫颈。

检测仪的顶端含少量（约一茶匙）的无菌水。当按下仪器上部的按钮时，无菌水便流入宫颈。当放开被按的按钮时，液体即从阴道流回仪器内。检测仪从阴道取出后，采集的样本需被转移到小瓶内，然后送医疗实验室检验。

女性月经期，或如果你从未体验过性交，不适宜使用本检测仪。如果你正在使用阴道药物，包括阴道清洗剂，请停用2天后使用本检测仪。本产品对阴道避孕环，避孕套或阴道润滑剂没有任何影响。到目前为止，没有孕期女性使用本产品的先例。本产品呈圆管状，质软，不含健康或安全风险。

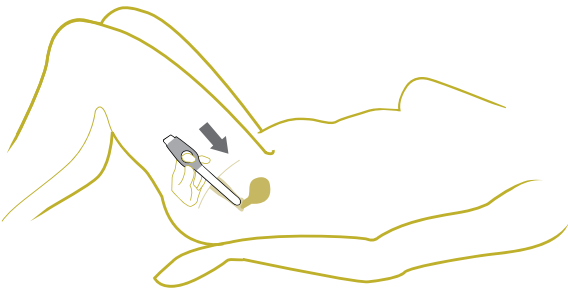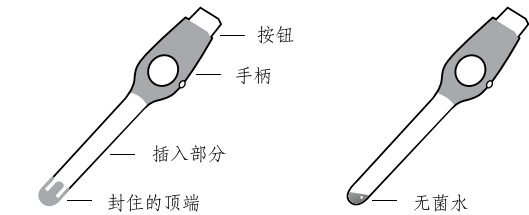

## 基本准备


1 清洗双手




2 取出小瓶，摘下瓶盖




3 打开检测仪的包装

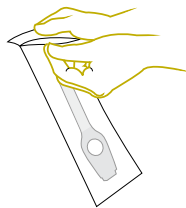

4 取出检测仪，  
手持蓝色的部位

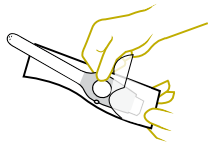

5 将检测仪顶端的封条摘除。  
可见检测仪顶尖部位的水滴。

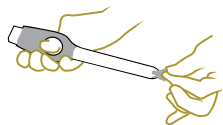

## 选择适当的姿势

6 A: 卧姿

坐垫上应铺盖毛巾。  
坐在铺着毛巾的垫子上。  
抬高膝盖，把腿张开。



B: 坐姿


坐在马桶座上，  
分开双腿。




## 怎样自采样本

阴道采样可能只采到少量的液体，这没关系。因为检测需要很少的样本。你或许发现检测仪上粘少量血或粘液。这是正常的，并不影响检测的结果。

7 如图所示，握住检测仪蓝色的手柄，用另一只手将阴唇打开。将检测仪轻轻往阴道里送，稍稍向后倾斜，尽可能送入深处，直到你感到受阻。

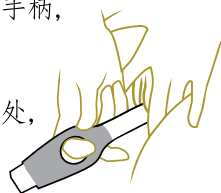


8 握住检测仪，按白色的按钮。完全按下。

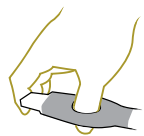


9 当白色按钮全部按下后，默数三下。



10 松开按按钮的手。将检测仪慢慢拿出体外，边往外拿边转动。这时，被放出的液体会自然流回检测仪。有时，白色的按钮不会立即反弹。这是正常的。

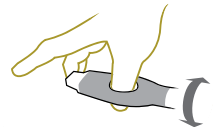

11 将检测仪的前半部分插入小瓶。此时小瓶和检测仪应直立。按检测仪的按钮。全部按下去。采集的样本便流入小瓶中。样本看起来浑浊，可能含粘液。这是正常的。

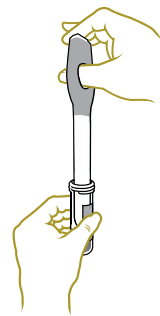

12 把检测仪从小瓶中取出。把瓶盖拧好。请务必将瓶盖拧紧。

