

ข้อแนะนำการใช้อุปกรณ์

Concised User Instruction Delphi Screener

การเตรียมตัว - Preparation

❶ ล้างมือ

Wash your hands.




❷ นำขวดพลาสติกออกมา แล้วเปิดฝาดอก

Take the vial and remove cap.




❸ เปิดซองอุปกรณ์

Open the pouch.

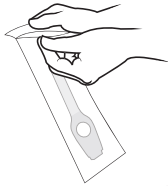


❹ หยิบอุปกรณ์

Take the Screener.

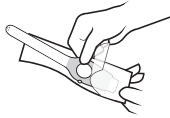

❺ ดึงแถบที่ปิดปลายอุปกรณ์ออก

Pull the seal off.

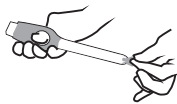

เลือกท่าที่สะดวกของท่าน

Choose your position

❻ นอนหงาย หรือนั่ง

Lying down or sitting down.



การเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง

Self-Collection of Test Specimen

❼ สอดอุปกรณ์เข้าอย่างนุ่มนวล ให้ลึกสุดพอดี

Insert Screener slowly and gently to the maximum.



❽ กดปุ่มสีขาวค้างไว้

Press the white button.




❾ นับ 1 ถึง 3

Count to 3.




❿ ปล่อยปุ่มกด และ ดึงอุปกรณ์ออก

Release the button and take the Screener out.

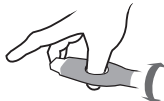

⓫ นำอุปกรณ์ใส่ขวดพลาสติก แล้วกดปุ่มสีขาวดังภาพ

Hold top Screener halfway into vial and press button.

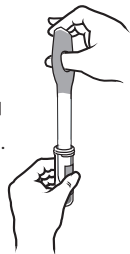


⓬ ปิดฝาขวดพลาสติกให้แน่น

Place the cap on the vial.



⓭ นำอุปกรณ์ และขวดพลาสติกใส่ลงในถุงพลาสติก

Put Screener and vial in plastic bag.

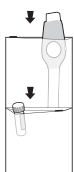


⓮ ล้างมือ

Wash your hands.



⓯ นำถุงส่งที่แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่

Hand over the bag to the doctor (-assistant).

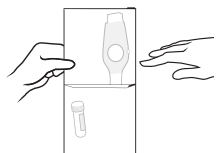

หากมีข้อสงสัย กรุณาปรึกษาแพทย์

Extended User Instructions are available at your doctor.