
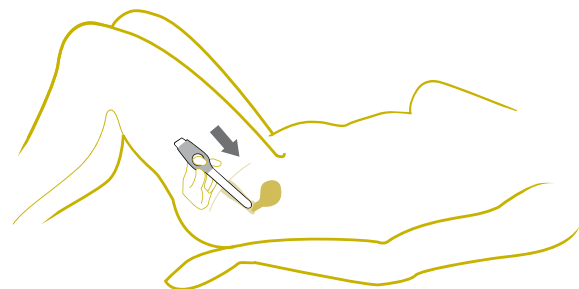


Lue ohjeet huolellisesti ennen näytteenottovälineen käyttöä

Delphi Screener -näytteenottovälineellä voit itse ottaa nestemäisen solunäytteen kohdunkaulan ja emättimen alueelta yksinkertaisella ja kivuttomalla tavalla. Delphi Screener on suunniteltu niin, että sen kärki ulottuu lähelle kohdunkaulaa kun väline asetetaan emättimeen.


Näytteenottovälineen kärki sisältää pienen määrän (noin teelusikallisen) steriiliä vettä. Takaosan painiketta painamalla vesi vapautuu kohdunkaulan alueelle. Kun painike vapautetaan, vesi ja sen mukana soluja kohdunkaulasta ja emättimestä imeytyy takaisin näytteenottovälineeseen. Tämän jälkeen näytteenottoväline otetaan ulos emättimestä ja näyte siirretään näyteputkeen. Näyte tutkitaan laboratoriossa.

Älä käytä näytteenottovälinettä kuukautisen aikana. Muusta syystä kuin kuukautisista johtuva verenvuoto ei ole este näytteenotolle. Jos käytät emättimen paikallishoitovalmisteita tai -lääkkeitä, lopeta käyttö kahdeksi päiväksi ennen näytteenottoa. Ehkäisyrenkaan, kondomien tai vesipohjaisten liukasteiden käyttöä ei tarvitse keskeyttää ennen näytteenottoa. Kokemuksia näytteenottovälineen käytöstä raskauden aikana ei vielä ole, mutta sen pehmeästä ja pyöristetystä muotoilusta johtuen näytteenoton oletetaan olevan turvallista myös raskausaikana.



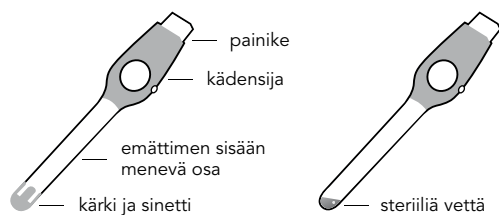


Valmistelu

- 1 Tarkista kirjekuoren sisältö:
a - Delphi Screener -näytteenottoväline
b - näyteputki
c - muovipussi ja imeytyspaperi
d - tutkimusasiakirjat
e - palautuskuori
f - käyttöohje
Tarkista, että näyteputkeen ja kyselylomakkeeseen painettu henkilötunnuksesi on oikein.

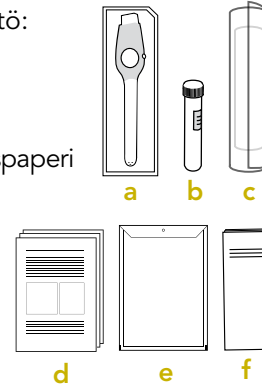

- 2 Pese kädet.
- 3 Avaa näyteputki valmiiksi näytettä varten ja pidä putki sekä sen korkki ulottuvillasi.
- 4 Avaa näytteenottovälineen pussi.
- 5 Ota näytteenottoväline käteesi. Pidä kiinni sinisestä kädensijasta.
- 6 Irrota näytteenottovälineen kärjessä oleva sinetti. Kärjessä voi näkyä muutama vesipisara.

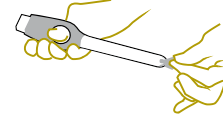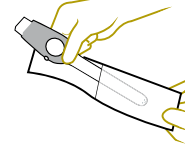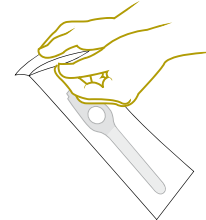

Valitse asento

- 7 **A: Makuulla**
Käy makuulle ja aseta tyyny takapuolesi alle. Suojaa tyyny pyyhkeellä. Koukista polvet ja avaa jalat haara-asentoon.



- B: Istuen**
Istu wc-istuimelle jalat avattuna haara-asentoon.



Näytteenotto

Näytteenoton jälkeen emättimestä voi valua ulos vähän vettä. Tämä on normaalia. Näytteen tutkimiseen tarvitaan vain pieni määrä nestettä. Näytteenottovälineen pinnalla voi näytteenoton jälkeen olla vähän limaa tai verta - tämä on normaalia eikä tule vaikuttamaan testin tulokseen.

- 8 Pidä kiinni näytteenottovälineen sinisestä kädensijasta kuvan osoittamalla tavalla ja levitä häpyhuulia toisella kädellä. Työnnä näytteenottovälineen kärki hitaasti emättimeen kallistamalla sitä samalla hieman taaksepäin, kunnes tunnet vastusta.




- 9 Pidä näytteenottoväline paikallaan ja paina valkoinen painike pohjaan.




- 10 Laske kolmeen.



- 11 Vapauta painike ja poista näytteenottoväline emättimestä hitaasti kiertävällä liikkeellä. Neste imeytyy nyt takaisin näytteenottovälineeseen. Joskus valkoinen painike ei palaudu välittömästi ylös kun näytteenottovälinettä poistetaan emättimestä.

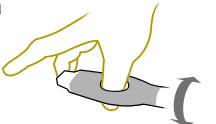

- 12 Työnnä näytteenottovälineen kärki näyteputken sisälle, noin putken puoliväliin. Pidä näyteputki pystyssä. Paina näytteenottovälineen painike pohjaan. Näyte vapautuu nyt näyteputkeen. Näyte on samea ja voi sisältää limaa; tämä on normaalia. Näytteen tutkimiseen tarvitaan vain pieni määrä näytteenottovälineessä olleesta nesteestä.

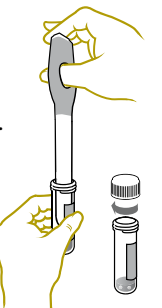

- 13 Ota näytteenottovälineen kärki ulos näyteputkesta. Kierrä putken kansi tiukasti kiinni.



Näytteenoton jälkeen

- 14 Näytteenottoväline on kertakäyttöinen. Heitä käytetty näytteenottoväline roskeen.

- 15 Pese kädet uudelleen.

- 16 Laita näyteputki imetyspaperin kanssa muovipussiin. Sulje pussi tarranauhalla.

- 17 Laita pussissa oleva näyteputki, sekä täytetty kyselylomake takaisin laatikkoon. Tarkista, että muistit allekirjoittaa kyselylomakkeen viimeisellä sivulla olevan tutkittavan suostumuksen. Sulje laatikko.

- 18 Laita laatikko palautuskuoreen. Palautuskuoren postimaksu on maksettu, voit postittaa sen ilman postimerkkiä. Postita näyte 24 tunnin kuluessa näytteenotosta.

**POSTITA NÄYTE 24 TUNNIN
KULUESSA NÄYTTEENOTOSTA,
JOTTA NÄYTE SÄILYY
LAADUKKAANA!**

Yleistä tietoa


Älä käytä Screener –näytteenottovälinettä sen parasta ennen –päiväyksen jälkeen. Päiväys on kirjattu näytteenottovälineen pussiin.

Jos näytteenottovälineen pussi on vahingoittunut tai auki, näytteenottovälineen steriiliyttä ei voida taata. Tässä tapauksessa suosittelemme käyttämään uutta välinettä.

Osoitteesta www.delphiscreener.com löydät lisätietoa Screener –näytteenottovälineestä, sekä animaatiovideon sen käytöstä.

Please visit www.delphiscreener.com for an animation video on the use of the Screener, or for additional information on the Delphi Screener.

STERILE R

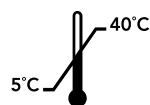

Delphi Bioscience B.V.
Glashorst 126
3925 BV Scherpenzeel
The Netherlands



Päivitetty: Lokakuu 2011

-210015-

Vastuuvapauslauseke

Delphi Bioscience ei vastaa näytteenottovälineen huolimattomasta tai väärästä käytöstä. Mikäli tuotteen käytössä ilmenee epäselvyyksiä tai kysymyksiä tämän käyttöohjeen lukemisen jälkeen, tulee ottaa yhteyttä paikalliseen yhteyspisteeseen.

Käyttöohje Delphi Screener

delphi
bioscience