
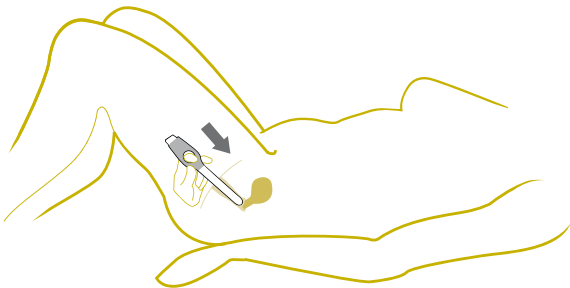


Läs instruktionerna noggrant innan du tar ditt test

Med Delphi Screener-provtagningsinstrumentet kan du själv ta ett flytande cellprov från livmoderhalsen och vaginan på ett enkelt och smärtfritt sätt. Delphi Screener är konstruerat så att instrumentspetsen säkert kommer nära livmoderhalsen när instrumentet förs in i vaginan.


Instrumentets spets innehåller en liten mängd (tesked) sterilt vatten. När knappen på baksidan trycks ned, flyter vattnet ut över livmoderhalsområdet. När knappen släpps, sugs vattnet tillsammans med celler från livmoderhalsen och vaginan tillbaka in i provtagningsinstrumentet. Därefter tas instrumentet ut från vaginan och provet förs in i behållaren. Provet undersöks i laboratoriet.

Använd inte provtagningsinstrumentet under menstruation. Annan blödning än menstruation är inte ett hinder för provtagning. Om du använder vaginala vårdprodukter eller läkemedel, så måste du ha ett två dagars uppehåll innan du tar testet. Du kan fortsätta att använda p-ring, kondomer eller vattenbaserade glidmedel. Det finns ännu ingen erfarenhet av provtagningsinstrumentets användning under graviditet, men på grund av dess mjuka och rundade form väntas inga hälso- eller säkerhetsrisker förekomma.



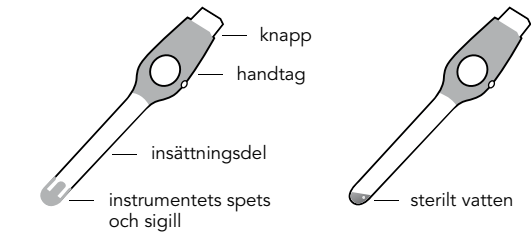


Förberedning

- 1 Granska innehållet i kuvertet :
 - a- Delphi Screener-provtagningsinstrument
 - b- behållare
 - c- plastpåse och handduk
 - d- undersökningsdokument
 - e- returkuvert
 - f- bruksanvisningPå behållaren och frågeformuläret finns ditt personnummer. Vänligen kontrollera att det är korrekt.

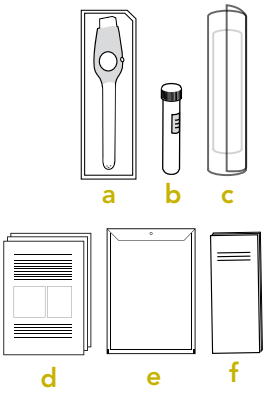

- 2 Tvätta händerna.
- 3 Öppna behållaren och håll både behållaren och locket inom räckhåll.
- 4 Öppna påsen med provtagningsinstrumentet.
- 5 Tag provtagningsinstrumentet i handen genom att hålla i det blåa handtaget.
- 6 Ta loss sigillet på instrumentets spets. Några vattendroppar kan synas.

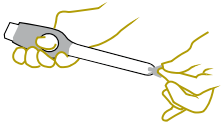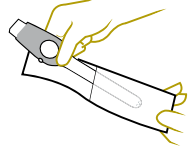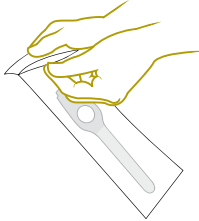

Välj önskad ställning


- 7 a. Liggande ställning
Ligg ner med en dyna under bakdelen. Skydda dynan med en handduk. Böj knäna och håll benen isär.
- b. Sittande ställning
Sätt dig på toaletsitsen och håll benen isär.




Provtagningen

Efter provtagningen kan det komma litet vatten ut från vaginan. Det är inget problem. Endast en liten mängd vätska behövs för testet. Det kan finnas litet slem eller blod på instrumentet efter provtagningen. Det är normalt och inverkar inte på testresultatet.

- 8 Håll i instrumentets blåa handtag så som bilden visar och använd andra handen till att öppna blygläpparna. För instrumentets spets långsamt in i vaginan genom att samtidigt rikta den litet bakåt, tills du känner motstånd.
- 9 Håll i instrumentet stadigt och tryck samtidigt ned den vita knappen.
- 10 Räkna till tre.
- 11 Släpp knappen och ta ut instrumentet ur vaginan, vrid samtidigt långsamt på instrumentet. Vätskan sugs nu tillbaka in i instrumentet. Ibland stiger den vita knappen inte genast upp då instrumentet tas ut ur vaginan.

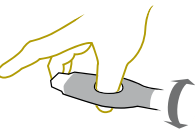

- 12 Sätt spetsen av provtagningsinstrumentet halvvägs in i behållarens öppning. Håll behållaren i upprätt ställning. Töm ut innehållet i behållaren genom att trycka ned knappen. Provet är grumligt och kan innehålla slem; detta är normalt. Endast en liten mängd av vätskan i provtagningsinstrumentet behövs för testanalysen.

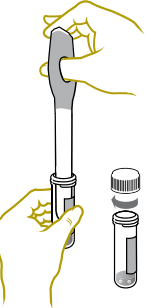

- 13 Ta instrumentändan ut ur behållaren. Sätt locket på behållaren och slut det tätt genom att vrida det på behållaren.

Efter provtagningen

- 14 Provtagningsinstrumentet kan bara användas en gång. Släng provtagningsinstrumentet i avfallet.

- 15 Tvätta händerna igen.

- 16 Sätt behållaren med duken i plastpåsen. Slut påsen med kardborrbandet.

- 17 Sätt påsen med behållaren samt det ifyllda frågeformuläret tillbaka i lådan. Vänligen kontrollera att du kommit ihåg att underteckna ditt samtycke till undersökningen på formulärets sista sida. Slut lådan.

- 18 Lägg lådan i returkuvertet. Portot är betalt så returkuvertet kan postas utan frimärke. Posta provet inom 24 timmar efter provtagningen.

**POSTA PROVET INOM 24 TIMMAR
EFTER PROVTAGNINGEN FÖR ATT
KVALITETEN PÅ PROVET SKALL
BIBEHÅLLAS!**

Allmän information


Använd inte provtagningsinstrumentet efter utgångsdatumet som står skrivet på påsen. (☒...-....).

Om provtagningsinstrumentets påse har skadats eller om den är öppen, kan man inte garantera att instrumentet är sterilt. I så fall rekommenderar vi att ett nytt instrument används.

Mera information med animerad video finns att få på www.delphiscreener.com.

Please visit www.delphiscreener.com for an animation video on the use of the Screener, or for additional information on the Delphi Screener.

STERILE R

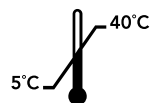

Delphi Bioscience B.V.
Glashorst 126
3925 BV Scherpenzeel
The Netherlands



Senast uppdaterad: Oktober 2011

-210016-

Ansvarsfrihetsklausul

Delphi Bioscience ansvarar inte för felaktig eller oförsiktig användning av provtagningsinstrumentet. Om något är oklart eller det uppstått frågor efter att bruksanvisningen lästs bör man kontakta det lokala kontaktstället.



Bruksanvisning Delphi Screener

delphi
bioscience